



2 Procedimento de destravamento

Para acessar o menu Completo e alterar as configurações

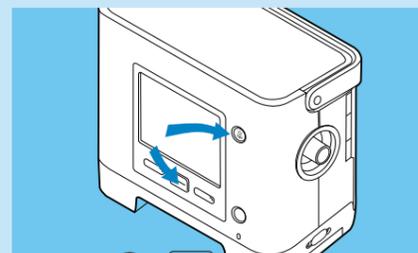

Pressione e e mantenha pressionados por alguns segundos para acessar a página Configuração

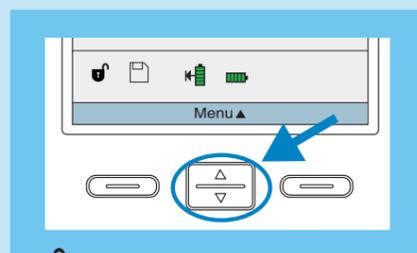


Se for exibido na tela principal, isso significa que o acesso total ao menu já está permitido. Pressione para acessar o menu


Para continuar a ter acesso total às configurações




Navegue até **Opções** e pressione **Selecionar**

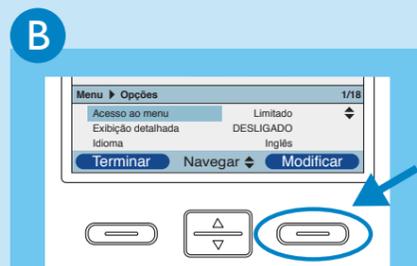

Pressione **Modificar** para entrar no menu **Acesso**

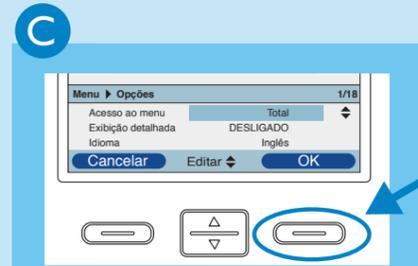

Altere para **Total** usando e pressione **OK** para confirmar

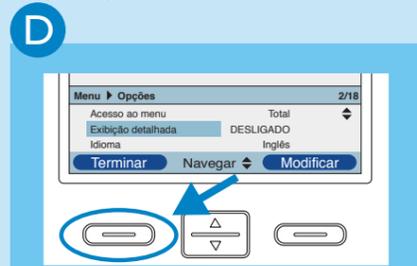

Pressione **Terminar** e **Saída** para retornar à Tela Inicial

A Philips Healthcare é parte integrante da Royal Philips Electronics

Para falar conosco
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Ásia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio e África
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou obrigações outras, não sendo responsável por consequências resultantes do uso desta publicação.

RRD Brazil AE 1/31/11 MCI 4102020

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Customer Service
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Ásia Pacífico
+65 6882 5282

www.philips.com/respironics

Trilogy¹⁰⁰





Guia de configuração

- 1 Visão geral
- 2 Procedimento de destravamento
- 3 Configuração do circuito
- 4 Configuração de ventilação

PHILIPS
RESPIRONICS
sense and simplicity

1 Visão geral

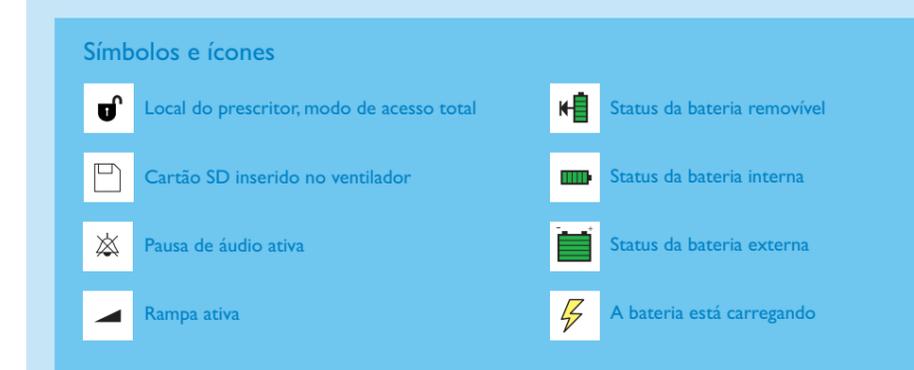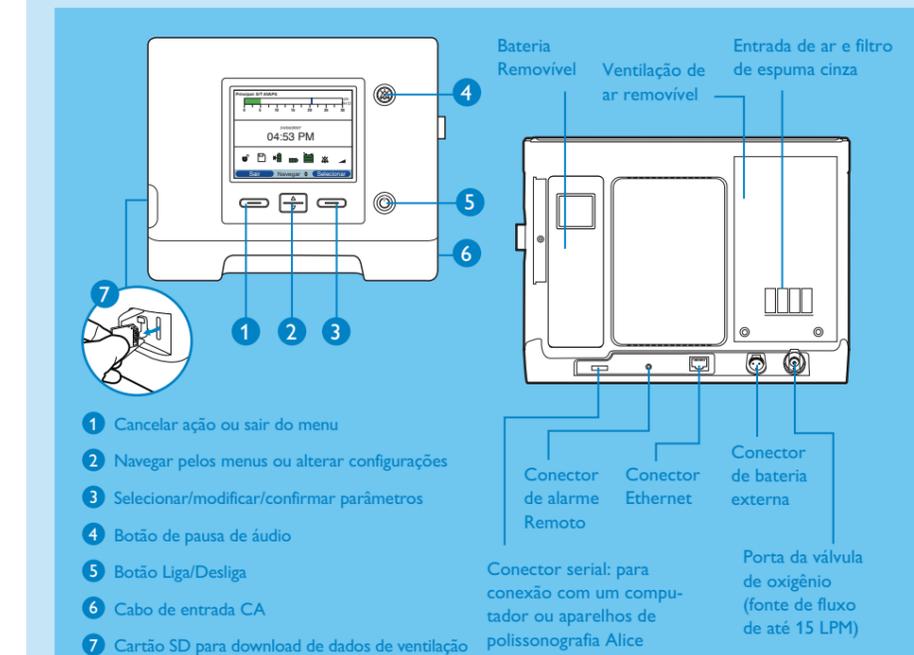




3 Configuração do circuito

Antes de executar o **Trilogy100**, é necessário configurar o tipo de circuito.


Configuração com a válvula de expiração

Configuração com a porta de expiração

Certifique-se de que o **Trilogy100** esteja desligado antes de realizar as seguintes etapas

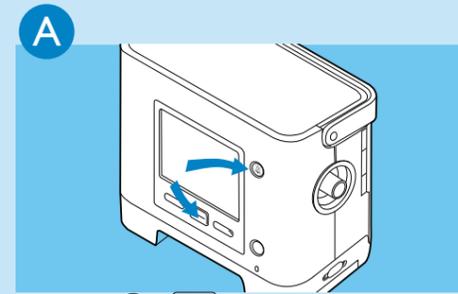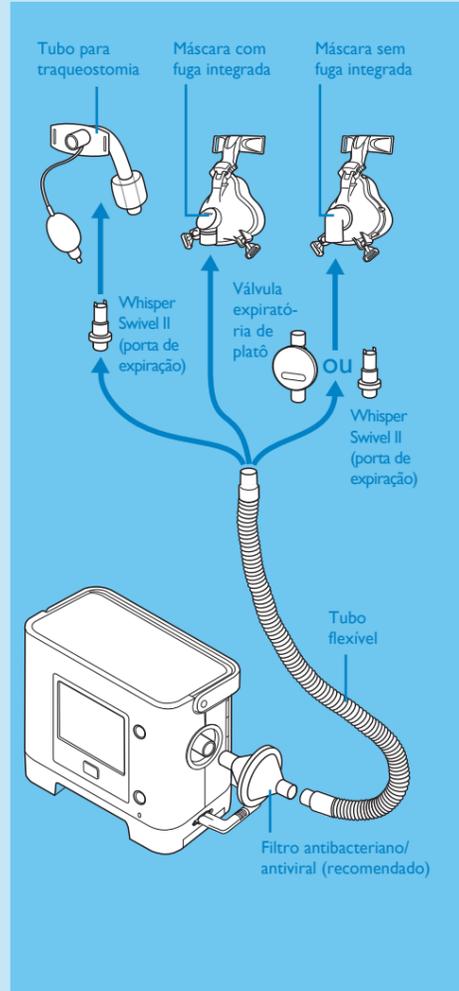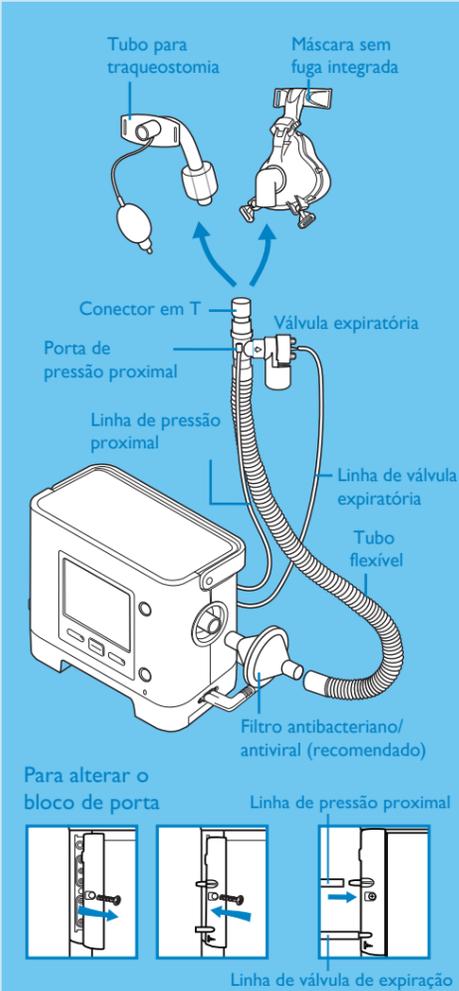


Pressione e e mantenha pressionados por alguns segundos para acessar a página Configuração

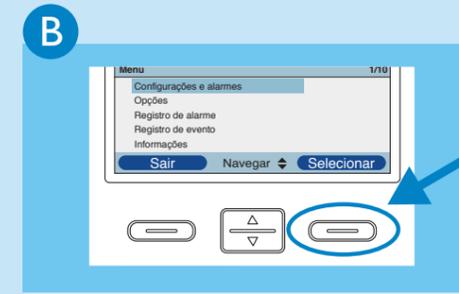


Selecione **Configurações e alarmes**



Navegue até **Tipo de circuito** e pressione **Modificar**

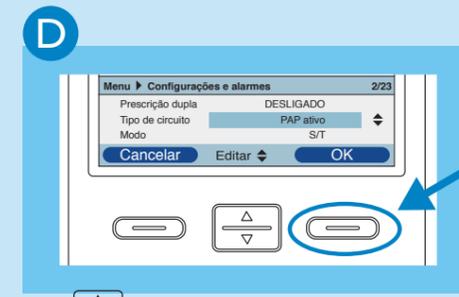


Use para escolher **PAP ativo** (configuração da válvula de expiração) ou **passivo** (configuração da porta de expiração) e, em seguida, pressione **OK** duas vezes para confirmar

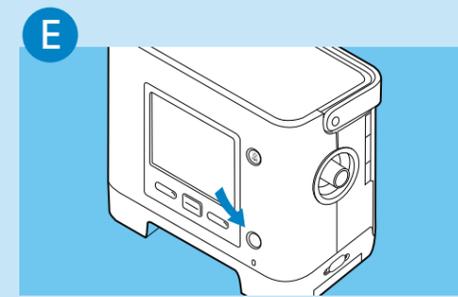


Pressione para operar o dispositivo ou continuar navegando pelo menu para configurar os parâmetros de ventilação

Verifique se o tipo de circuito está configurado corretamente.


4 Configuração de ventilação

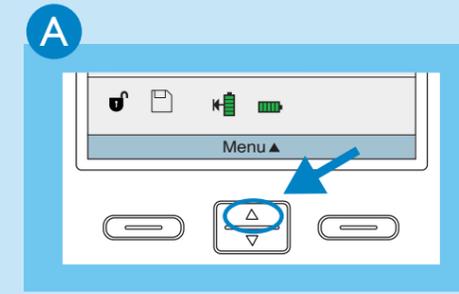


Na tela principal, pressione **Menu**

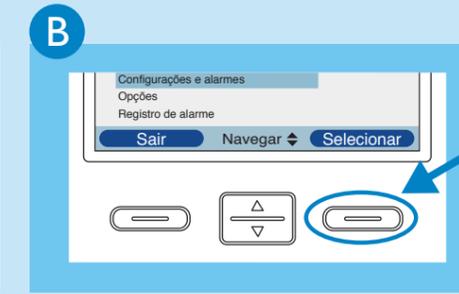


Selecione **Configurações e alarmes**

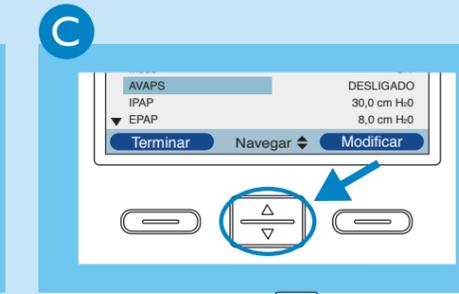


Role para cima e para baixo para navegar pelos diferentes alarmes e configurações

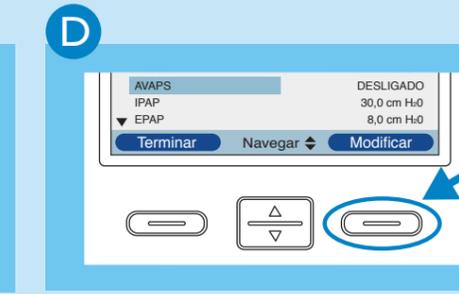


Pressione **Modificar** para alterar o parâmetro destacado em azul

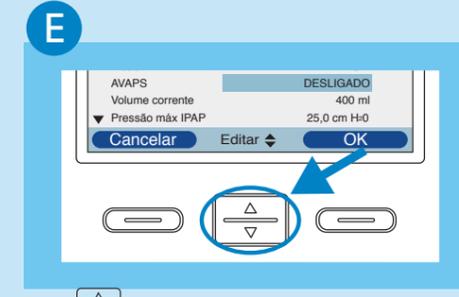

Use para alterar o valor ou o status da configuração

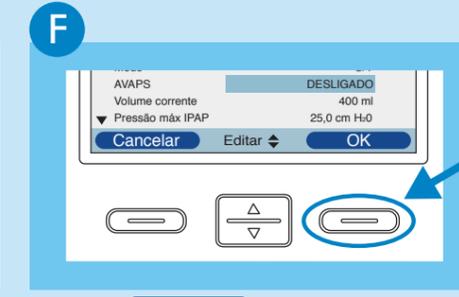


Pressione **OK** para validar uma nova configuração

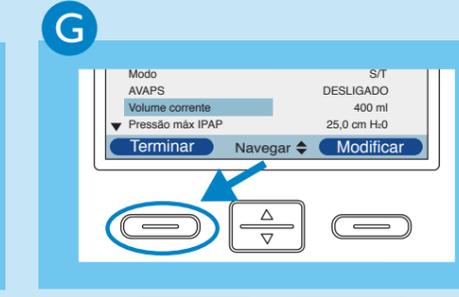

Pressione **Terminar** e **Saída** para retornar à tela principal

Prescrição dupla

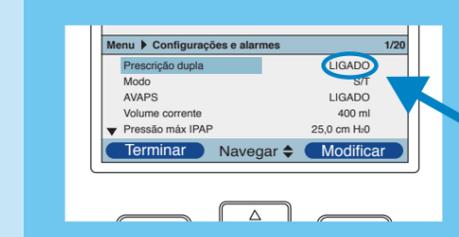

Se a **Prescrição dupla** estiver ativada, ambas as prescrições devem ser ajustadas conforme explicado anteriormente



Duas prescrições para definir